




شرکت تهران اتکال
TEHRAN ETTEKAL CO.

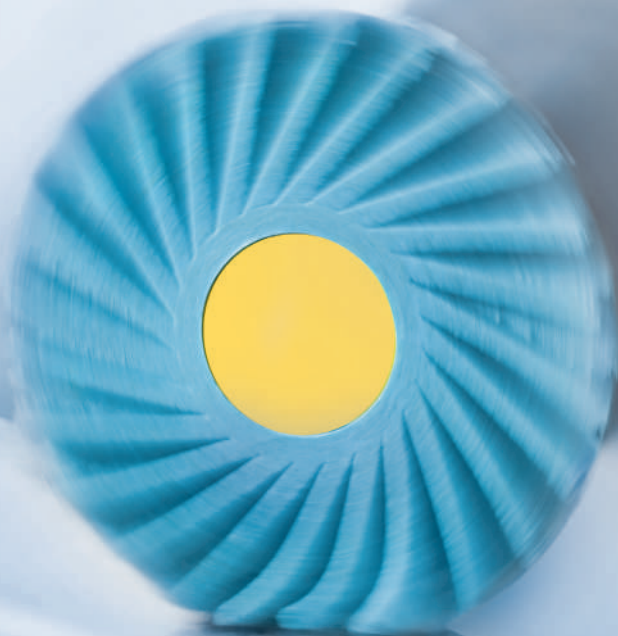

DENTAL

made
in
Germany

دیسک‌های پرداخت کامپوزیت و پرسن
با قابلیت استفاده در کلینیک‌ها و لابراتوارهای دندانپزشکی



“من در طول دوره دندانپزشکی خود با سیستم‌های پالایش مختلفی کارکرده‌ام و زمانی که با انواع ماریپچ آشنا شدم، بلافاصله به این نتیجه رسیدم که دیگر از سیستم‌های قبلی استفاده نخواهم نمود. عملکرد این دیسک‌ها هم در رستوریشن‌های آنتریور و پوسترور بسیار سریع و فوق‌العاده است. این نوع دیسک‌ها نسبت به همه آن سیستم‌هایی که من تا کنون استفاده می‌کردم با دوام‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌باشد.”



Approximal



Lingual



Buccal



Labial



Incisal



Occlusal

ابزاری برای همه سطوح دندانی



با دوام



نهایت جلا و زیبایی



آماده سازی ساختار سطحی



جلوگیری از ایجاد حرارت



کاربرد دقیق و مؤثر





- مخصوص استفاده در سیستم‌های دو مرحله ای
- سازگار با انواع کامپوزیت‌ها
- دارای شکل مارپیچی برای استفاده راحت تر

Code: 9087
6 pieces

Code: 9086
6 pieces

High-shine polishing ②

Pre-polishing ①



fine / medium

3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

9086/1	9087/1	6284	6280	6184	6180	Code
14 x 1,6	11 x 1,6	14 x 1,6	11 x 1,6	14 x 1,6	11 x 1,6	ابعاد (mm)



Code: 9095
8 pieces

• جهت دستیابی به نتایج با کیفیت بالا حتی در سطح OCCLUSAL و ورود به شکافهای عمیق در سطح.

High-shine polishing ②

Pre-polishing ①

fine / medium



3.000 – 7.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹





- مخصوص استفاده در سیستم‌های دو مرحله ای
- سازگار با انواع کامپوزیت‌ها



Code: 9073
8 pieces

High-shine polishing ② Pre-polishing ①

fine / medium



3.000 – 7.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹





Code: 9088
6 pieces

- اصلاح بدون استفاده از Glaze
- پالیش نهایی موجب ایجاد سطح براق شیشه ای می شود
- دارای ذرات الماس جهت افزایش کیفیت پالیش

High-shine polishing ③ Pre-polishing ② Smoothing ①

fine / medium / coarse



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹





DIAPOL®

پرسلن



Code: 9077
9 pieces

- اصلاح بدون استفاده از Glaze
- پالیش نهایی موجب ایجاد سطح براق شیشه ای می شود
- دارای ذرات الماس جهت افزایش کیفیت پالیش

High-shine polishing ③ Pre-polishing ② Smoothing ①

fine / medium / coarse

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹





دی سیلیکات لیتیوم، سرامیک فلدسپات، سرامیک تقویت



- سیستم دو مرحله ای پولیش غنی شده با ذرات الماس
- قابل استفاده برای انجام اصلاحات بعد از قراردادن سرامیک

High-shine polishing 2

Pre-polishing 1

Code: 9092
6 pieces



fine / medium



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



9092/1

14 x 1,6

Code

ابعاد (mm)



DIACERA

زیر کتیا، آلومینیم



- سیستم پالیش دو مرحله ای غنی شده با ذرات الماس
- بدون نیاز به Glaze

Code: 9091
6 pieces

Pre-polishing ①
High-shine polishing ②

medium / fine



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Code

9091/1

ابعاد (mm)

14 x 1,6



EVEFLEX

آمالگام، طلا و فلز



Code: 9090/1
6 pieces

• کیت سه مرحله ای خورشیدی تقویت شده با شن سیلیکون کارباید
برای پرداخت طلا ، آمالگام و آلیاژهای غیر گرانبها

Pre-polishing ①
High-shine polishing ②

medium / fine



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Code

9090/1

ابعاد (mm)

14 x 1,6

پرسلن، کامپوزیت، فلزات گرانبها، آمالگام



- کیت پرداخت یونیورسال
- دارای ذرات سیلیکون کارباید
- برای استفاده در انواع دندان‌های (کامپوزیت، پرسلن، طلا، آمالگام)
- دارای سیلیکون نرم در اشکال مختلف جهت عملکردهای گوناگون

Smoothing ●

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



8 pieces



9070

Code

COMPOSOFT

کامپوزیت



- جهت هموار کردن ، پری پالیش و پالیش کامپوزیت
- حاوی ذرات اکسید آلومینیوم
- ذرات سیلیکونی مناسب جهت سطوح کامپوزیتی

High-shine polishing ③ Pre-polishing ② Smoothing ①

5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



9 pieces



Code

9089



- قابل استفاده و چرخش در جهات مختلف (رو به جلو عقب)
- دیسکهای پالیش قابل انعطاف با روکش الماس
- استفاده بهینه در پرسن
- فویل پلاستیکی بسیار نازک



Code: 9006
100 pieces +95RA



Code: 9009
250 pieces + 95RA + 95HP



FINE MEDIUM COARSE VERY COARSE



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 pieces
with or without mandrel



95RA	FD-14D	FD-14Dmf	FD-14Dg	FD-14Dxg	Code
-	14 x 0,11	14 x 0,14	14 x 0,17	14 x 0,21	(mm) ابعاد

FLEXI-D

کامپوزیت، طلا، آمالگام



Code: 9001
100 pieces +95RA

- دیسک های پولیش انعطاف پذیر
- برای کاربرد اینتر پروگزیمال
- برای استفاده در حرکت رو به جلو یا رو به عقب
- از یک طرف با اکسید آلومینیوم پوشش داده شده است



Code: 9004
250 pieces + 95RA + 95HP

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 pieces
with or without mandrel



EXTRA FINE ● FINE ● MEDIUM ● COARSE ●



Code 9595

ابعاد (mm)

-

9144

14 x 0,11

9143

14 x 0,14

9142

14 x 0,17

9141

14 x 0,21

FLEXISTRIPS-DIA



DIASTRIPS

کامپوزیت، پرسلن

پرسلن، کامپوزیت، فلز، دندان

- ۱۰۰ عدد نوار استریپ جهت پالیش کامپوزیت و پرسلن با روکش الماسه
- نوارهای قابل انعطاف جهت پالیش سطوح بین دندانی
- در نظر گرفتن فواصل بین قطعات ساینده جهت سهولت کاربرد

- جهت پالیش دستی
- با کاربرد بین دندانی
- منافذ موجود در نوارها بافتهای زیر و خشن را از بین می برد



COARSE (زبر)



MEDIUM



FINE



9011



9012

Code



DIACOMP® paste



DIAPOL® paste

کامپوزیت

پرسلن

• خمیر پالیش کامپوزیت

• خمیر پالیش پرسلن

Content: 2g

1 piece



Code	9705	9702
ابعاد (mm)	4 - 8	8 - 12

EVEBRUSH

BRACKET

پرسن ، کامپوزیت ، فلز

ارتودنسی، دیباندینگ

- غنی شده با ذرات سیلیکون کارباید
- قابل اتوکلاو

- برای حذف باقیمانده باندینگ ارتودنسی

Hardness: hard

<p>fine</p>  <p>5.000 – 7.000 min⁻¹</p>  <p>max. 10.000 min⁻¹</p>						<p>coarse</p>  <p>5.000 – 7.000 min⁻¹</p>  <p>max. 20.000 min⁻¹</p>
	Code	9493	9492	9491	5377	
ابعاد (mm)	4 x 6,5	4 x 6,5	6 x 5,5	5 x 10	10 x 0,7	ابعاد (mm)

EVEFLEX

آمالگام، طلا و فلز

CERASTONE

پرسلن، فلزات قیمتی و معمولی، آکرلیکها

• مولت شعله ای تقویتی با شن سیلیکون کارباید برای پرداخت لبه مایین PFM ، روکشهای فول متال ، طلا و آمالگام

• سنگ آرکانزاس
• برای ایجاد شیار و texture بر روی سطوح پرسلن ، فلز های قیمتی و معمولی، آکریل
• این محصول از سنگ های کَرندوم (Corundum) و سیلیکون کارباید به هم پیوسته ساخته شده است، که به علت دارا بودن سختی زیاد در ابزار برش و صیقل استفاده می‌شود.

Code: 4677

Code: 8696

extra fine 

FG: 80.000 - 100.000 min⁻¹ 

max. 120.000 min⁻¹



Code

ابعاد (mm)

FG

4677

8696

3 x 7



DIAPRO


دی سیلیکات لیتیوم

- سیستم الماسه پالیش سه مرحله ای
- اصلاح سریع بدون استفاده از مواد براق کننده
- جلای شیشه ای سطوح



Pre-polishing ①

High-shine polishing ②

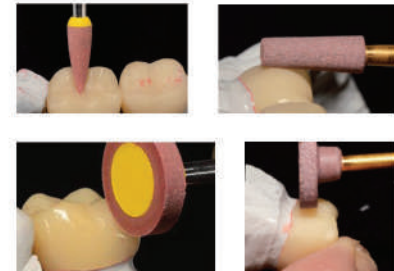

medium / fine



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



9 pieces




Code

9042




Code: 9041
9 pieces

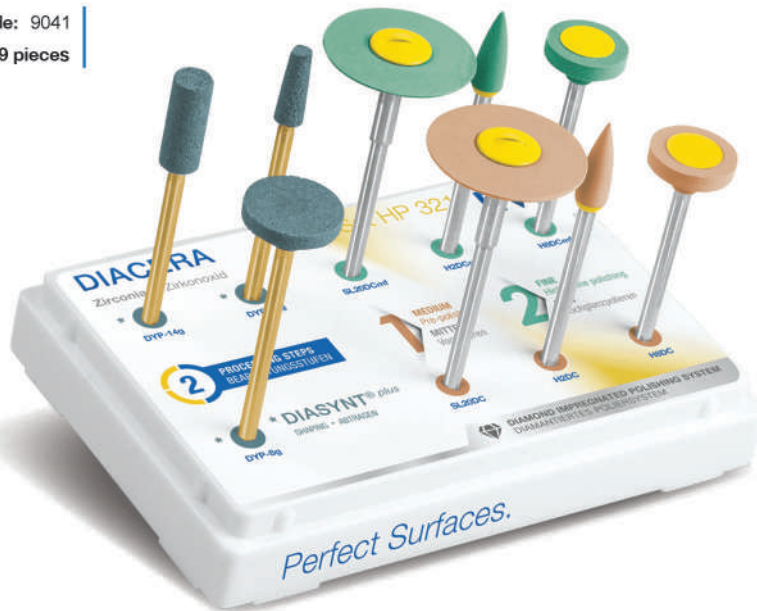

- مختص استفاده در فاصله بین رستوریشنهای زیرکینیا
- تراکم بالای ذرات الماس جهت ایجاد نهایت کیفیت
- بدون نیاز به مواد Glaze

High-shine polishing 2 Pre-polishing 1

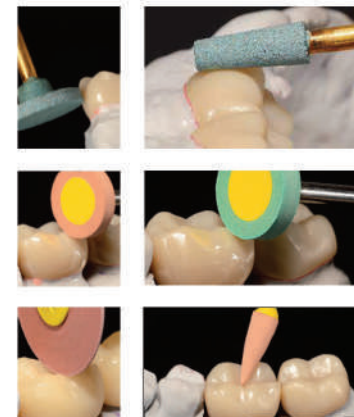

UNIVERSAL

پرسلن، فلزات گرانبها، آکرلیک، کامپوزیت

- برای براق کردن کلیه مواد دندانی
- حاوی ذرات ریز سیلیکون جهت استفاده در سطوح مختلف
- دارای اشکال مختلف جهت کاربردهای گوناگون
- دارای ذرات ساینده سیلیکون کارباید

coarse



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Code	9553	1000
ابعاد (mm)	5	22 x 3

COOLGRINDER





پرسن، فلز

• سنگ سایش بدون ایجاد حرارت در سطح مربوطه

DIADUR

پرسن، فلز

- تشکیل شده از سرامیک به هم وصل شده با سنگریزه الماس
- حفظ شکل ظاهری در مدت استفاده
- دوام و استحکام فوق العاده
- مقاوم در برابر حرارت

coarse 		
7.000 – 10.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹ 		
Code	8410	8300
ابعاد (mm)		

سنگ زیرکونیا، سرامیک فلدسپاتیک، لیتیوم دیسیلیکیت
دیسک زیر سنگ زدن لیتیوم دیسیلیکیت، زیرکونیا و پرسلن

- آغشته و اشباع شده با الماس
- بالاترین میزان ساییش
- کمترین میزان ایجاد گرما
- مناسب برای کاربرد بدون خنک کردن آب
- کم کردن ضخامت لبه Margin
- زبر

دیسک نرم سنگ زدن لیتیوم دیسیلیکیت، زیرکونیا و پرسلن

- آغشته و اشباع شده با الماس
- بالاترین میزان ساییش
- کمترین میزان ایجاد گرما
- مناسب برای کاربرد بدون خنک کردن آب
- کم کردن ضخامت لبه Margin
- مدیوم



8100

4 x 22



8000

4 x 22

Code
ابعاد (mm)

SOFT WHEELS

آکرلیک دنچر، سافت ریلاین، گاردهای دهان و تری های بلیچینگ



- غنی شده با مواد پالیش کننده
- بدون نیاز به خمیر پالیش
- نهایت جلا در آکرلیکها
- دارای ذرات ساینده اکسید آلومینیم

fine / medium



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 15.000 min⁻¹



Code

9553

9802

9801

ابعاد (mm)

5

22 x 3

22 x 3



Perfect Surfaces.

CE 0483
Note: www.eve-rotary.com/downloads
Changes, variations and errors reserved

AR

طراحی و ساخت:

EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Strasse 30
D-75179 Pforzheim, Germany

+49 72 31 97 77 -0

+49 72 31 97 77 -99

info@eve-rotary.com

www.eve-rotary.com



شرکت تهران اتکال
TEHRAN ETTEKAL CO.

عرضه توسط:

TEHRAN ETTEKAL CO.
Suite 3, Building 12, 13th Alley,
Mir Emad St., Tehran 15877, Iran

+9821 8873 8565 -6

+9821 8873 8565

ettekal@ettekal.com

www.tehranettekal.com

Edition: 3